

ADVANTAGE PLUS

Fulldautomatisk vaskemaskine til to eller fire endoskoper, med indbygget spritfunktion.






Nem betjening

- Enkel og overskueligt betjening.
- Enkel tilkobling af skop i unik konektorblok.
- Enkel og håndfri åbne-/lukkefunktion af vippelåg.
- 2-delt informationsdisplay i "trafiklys"-farver.
- Ergonomisk opbygning.

1) Betjeningspanel
2) Konektorblok
3) Skærm

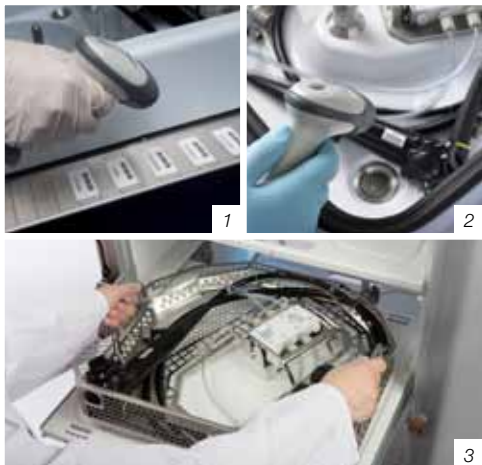

Effektivitet

- Indbygget strejkode- og chip-identifikationssystem.
- Hurtigt valg af vaskeprogram og sikker registrering af vaskedata.
- Automatisk spritning af skop efter vask.
- To vaskekamre nedsætter ventetiden og minimerer skopbehovet.
- Kassettesystem optimerer arbejdsgangen og skåner skoperne.

1) Strejkodescanner. Indlæsning af operatør m.m.
2) Strejkodescanner. Indlæsning af skoptype m.m.
3) Kassettesystem som følger skopet i hele processen



Hygiejne

- HEPA-filter sikrer bakteriefrit skyllevand.
- Direkte udluftning af låsbare vaskekamre.
- Automatisk selvdesinfektion af alle de indvendige dele af vaskemaskinen og filtersystemet.
- Kassettesystem kombineret med tørreskab eliminerer bakterievækst i skopet.
- Brugeroverført kontaminering af skoper kan forhindres ved hjælp af kassettesystem.

1) Let rengøring af alle overflader
2) Sprit, sæbe og kemi er let tilgængeligt



Service

- Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Santax Medico.
- Managementdatabase-software muliggør statistiske analyser af vaskeproces fra en eller flere maskiner.
- Landsdækkende serviceorganisation.
- Modulopbyggede service- og driftsaftaler.
- Vi tilbyder undervisning og forskellige kurser for personale og MTA.

Santax Medico har serviceafdelinger i København og Aarhus



Sikkerhed

- Elektronisk lås sikrer mod utilsigtet åbning af vaskekammeret.
- Individuel kodning af hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprocedure.
- Dokumentationssystemet sikrer sporbarhed af hele vaskeforløbet.
- Sikker opbevaring ifm. brug af tørreskabe. Medicinsk rensset luft tørrer skopets kanaler/overflader og forhindrer bakterievækst.
- Kommunikation mellem vaskemaskine og tørreskab sikrer mod utilsigtet opbevaring af urene skoper (option).


- 1) Skop indscannes i tørreskab
- 2) Display på tørreskab
- 3) Sikker opbevaring i tørreskab



Teknik

- Overholder EU-standarden (EN-ISO-15883-4) og er Fase 3 godkendt.
- Full sporbare af vaskeprocessen og operatører.
- Modulopbygning og to vaskekamre sikrer høj opetid.
- "Sprayhead"-teknologi som reducerer forbrug af pereddikesyre, sæbe og vand.
- Vasker alle typer skoper uanset fabrikat.

- 1) Sprayhead i funktion
- 2) Stregkodescanner. Registrering af bruger
- 3) Dansk skærmtekst

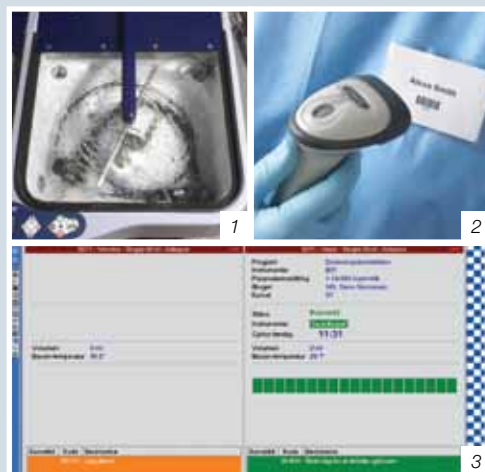



Tørreskabe

- Skoperne kan opbevares i op til syv dage i tørreskabene.
- Tørreskabene fås som enkeltsidede eller som gennemstik.
- Kassetter følger skopet i hele cyklussen og beskytter skoperne under transport.
- Opbevarer 8-16 skoper pr. skab og fylder kun 60 x 190 x 54 cm.
- Fylder kun 60 x 190 x 54 cm.
- Tørreskabet registrerer og overvåger liggetiden på skoperne.
- Kan leveres med mange tilvalgsfunktioner: HIS interface, dobbeltskop, Smartlight, Smart Connect og Sensor System.





- 1) Tidsstyring af skoper
 2) Kassettesystem med skop- og konnektorblok
 3) Tørreskab med tidsstyring og plads til 8 kassetter



Øvrigt

- Specialdesignede transportvogne (endoRIDER) med plads til 3 kassetter/skoper.
- Santax Medico forhandler forbrugsstoffer til vaskemaskinen: Rapicide pæredikesyre og Intercept sæbe.
- Intercept er et godkendt vaskemiddel til alle skoptyper og kan også bruges til manuel rengøring.
- Santax Medicos sælgere og teknikere hjælper gerne med indretningsforslag.

- 1) Transportvogn til kassetter
 2) Rapicide kemi
 3) Intercept sæbe

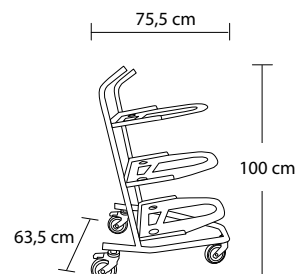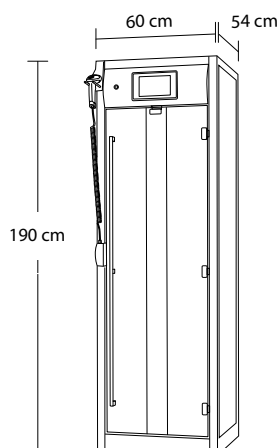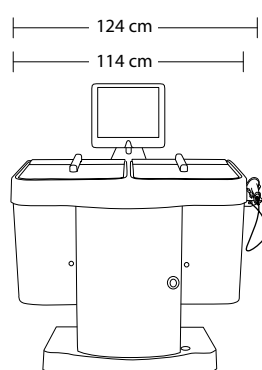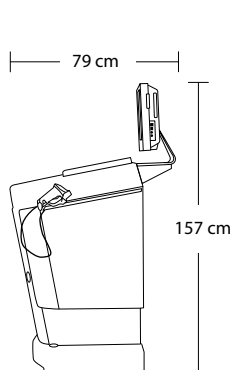

Santax Medico
 SANTAX NORDIC GROUP

Afdelinger:

Jylland (Head Office)
 Santax Medico A/S
 Bredskifte Allé 11
 8210 Århus V

Sjælland
 Produktionsvej 3
 2600 Glostrup

Tlf. 70 13 30 20
 Fax 70 13 30 22
 Service: 70 13 30 10

Info@santax.com
 service@santax.com
 salg@santax.com
 www.santax.com