




## ADVANTAGE PLUS®

Helautomatisk vaskemaskin for to eller fire endoskoper, med innebygd spritfunksjon.


## Brukervennlig betjening

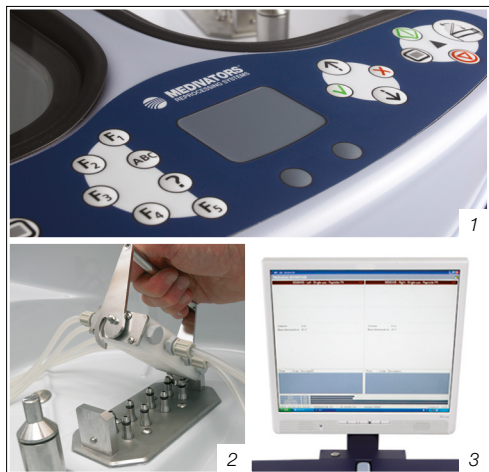

- Enkel og oversiktlig betjening.
- Enkel tilkobling av skop i unik konnektorblokk.
- Enkel og håndfri åpne-/lukkefunksjon for vippelukk.
- 2-delt informasjonsdisplay i "trafikklys"-farger.
- Ergonomisk utforming.

1) Betjeningspanel  
2) Konnektorblokk  
3) Skjerm


## Effektiv

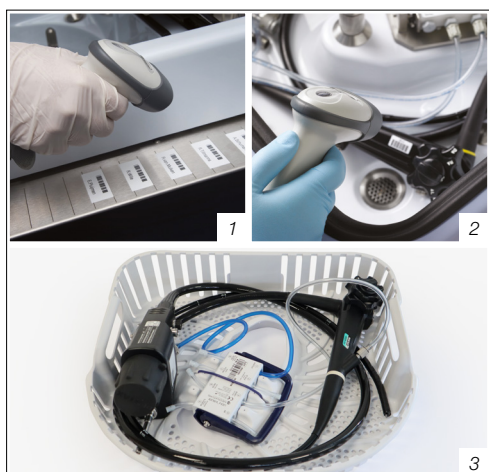

- Innebygd strekkode- og chip-identifikasjonssystem.
- Raskt valg av vaskeprogram og sikker registrering av vaskedata.
- Automatisk spriting av skop etter vask.
- To vaskearmer reduserer ventetiden og minimerer skopbehovet.
- Kassettsystem optimerer arbeidsprosessen og skåner skopene.

1) Strekkodeskanner. Innlesing av operatør m.m.  
2) Strekkodeskanner. Innlesing av skoptype m.m.  
3) Kassettsystem som følger skopet i hele prosessen.

## Hygiene

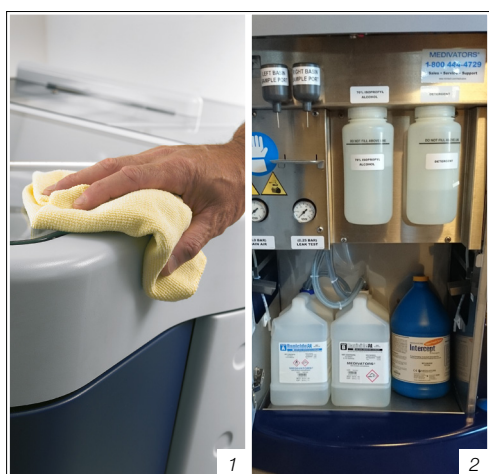

- HEPA-filter sikrer bakteriefritt skyllevann.
- Direkte utlufting av låsbare vaskekamre.
- Automatisk selvdesinfeksjon av alle de innvendige delene av vaskemaskinen og filtersystemet.
- Kassettsystem kom binert med tørkeskap eliminerer bakterievekst i skopet.
- Brukerovertøyd kontaminering av skop kan forhindres ved hjelp av kassettsystem.

1) Enkel rengjøring av alle overflater  
2) Sprit, såpe og kjemi er lett tilgjengelig




## Service

- Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Decotron.
- Managementdatabase-software muliggjør statistiske analyser av vaskeprosessen fra en eller flere maskiner.
- Landsdekkende serviceorganisasjon.
- Modulbaserte service- og driftsavtaler.
- Vi tilbyr undervisning og forskjellige kurs for personale og MTA.



## Sikkerhet

- Elektronisk lås sikrer mot utilsiktet åpning av vaskekammeret.
- Individuell koding av hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprosedyre.
- Dedikert konnektorblokk til hvert enkelt skop sikrer at alle kanaler er tilkoblet og blir korrekt behandlet.
- Dokumentasjonssystemet sikrer sporbarhet for hele vaskeforløpet.
- Sikker transport og oppbevaring av skopkassetter i EndoDRY tørkeskap.
- Kommunikasjon mellom vaskemaskin og tørkeskap sikrer mot utilsiktet oppbevaring av urene skop (SMART connect option).

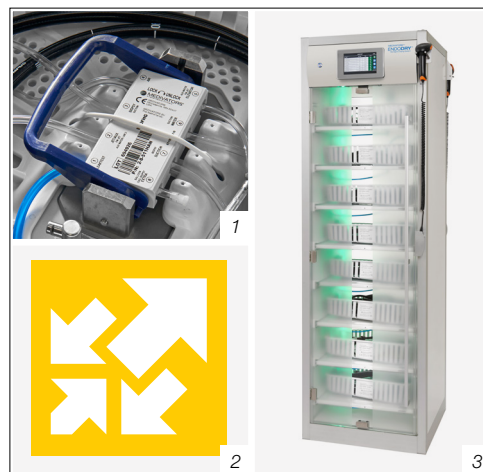

1) Konnektorblokk  
2) SMART connect  
3) Sikker oppbevaring i tørkeskap



## Teknik

- Overholder EU-standarden (EN-ISO-15883-4).
- Full sporbarhet av vaskeprosessen og operatører.
- Moduloppbygning og to vaskekamre sikrer høy oppetid.
- "Sprayhead"-teknologi som reduserer forbruk av poredikesyre, såpe og vann.
- Vasker alle typer skop uansett fabrikkat.



1) Sprayhead i funksjon  
2) Strekkodescanner. Registrering av bruker  
3) Norsk skjermttekst



## Tørkeskap

- Skopene kan oppbevares i opp til syv dager i tørkeskapene.
- Tørkeskapene leveres enkeltstående eller med gjennomstikk.
- Kassetter følger skopet i hele syklusen og beskytter skopene under transport.
- Oppbevaring av 8-16 skop pr. skap.
- Måler kun 60 x 190 x 54 cm.
- Tørkeskapet registrerer og overvåker liggetiden for skopene.
- Kan leveres med mange tilvalgsfunksjoner: HIS interface, dobbeltskap, Smartlight, Smart Connect og Sensor System.

- 1) Tidsstyring av skop  
 2) Kassettsystem med skop- og konnektorblokk  
 3) Tørkeskap med tidsstyring og plass til 8 kassetter



## Annet

- Decotron forhandler forbruksmateriell til vaskemaskinen: Rapicide PA pereddikesyre og Intercept såpe.
- Intercept er et godkjent vaskemiddel til alle skoptyper og kan også brukes til manuell rengjøring.
- Decotrons selgere og teknikere hjelper gjerne med innredningsforslag.

- 1) Transportvogn til kassetter  
 2) Rapicide PA kjemi  
 3) Intercept såpe

