



ADVANTAGE PLUS® Pass-Thru


Helautomatisk gjennomstikks asynkron vaskemaskin med innebygd spritfunksjon.



Enkel betjening

- Nye enkle tastaturer og innebygd strekkodeskanner på ren side.
- Enkel tilkobling av skop i ny unik konnektorblokk og lett plastkassett.
- 2-delt touch-informasjonsdisplay i "trafikklys"-farger på uren side.
- God ergonomi med lav betjeningshøyde, store tilgjengelige vaskekamre.
- Praktisk kjemikalieskuff med uttrekk og enkel adgang til alkoholtank.
- Smart samtaleport mellom ren og uren side.

- 1) Betjeningspanel
2) Skjerm
3) Samtaleport

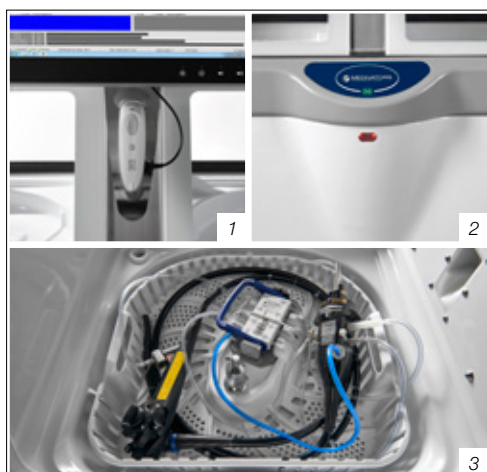


Effektivitet

- Vasker opp til 4 skop pr. time. Med dobbeltskopfunksjon vaskes 8 mindre skop pr. time.
- Innebygd strekkode- og RFID-identifikasjonssystem*.
- Raskt valg av vaskeprogram og sikker registrering av vaskedata.
- Mulighet for automatisk spriting av skop etter vask.
- To asynkrone vaskekamre reduserer ventetiden og minimerer skopbehovet.
- Kassettsystem optimerer arbeidsprosessen og skåner skopene.

* RFID forventes klar medio 2016.

- 1) Strekkodeskanner. Innlesing av operatør m.m.
2) RFID-sensor
3) Kassettsystem som følger skopet i hele prosessen

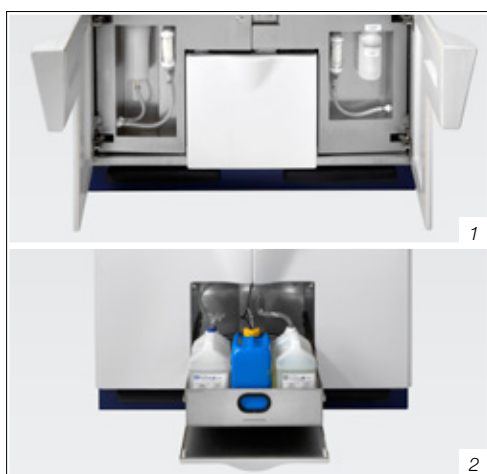

Hygiene

- Enkel og håndfri åpne-/lukkefunksjon for skyvelokk.
- Innebygd HEPA-filter sikrer bakteriefritt skyllevann.
- Direkte utlufting av låsbare vaskekamre.
- Automatisk selvdesinfeksjon av alle de innvendige delene av vaskemaskinen og filtersystemet.
- Kassettsystem kombinert med tørkeskap eliminerer bakterievekst i skopet.
- Brukeroverført kontaminering av skop kan forhindres ved hjelp av kassettsystem.

- 1) Enkel tilgang til filtre, alkohol og kjemikalieskuff
2) Sprit, såpe og kjemi er lett tilgjengelig



Baksiden

Service

- Teknisk fjernsupport via modem eller LAN fra MTA eller Decotron.
- Managementdatabase-software muliggjør statistiske analyser av vaskeprosessen fra en eller flere maskiner.
- Landsdekkende serviceorganisasjon.
- Modulbaserte service- og driftsavtaler.
- Vi tilbyr undervisning og forskjellige kurs for personale og MTA.

Decotron har serviceavdeling i Skedsmokorset



Sikkerhet

- Elektronisk lås sikrer mot utilsiktet åpning av vaskekammeret.
- Individuell koding av hvert enkelt skop sikrer korrekt vaskeprosedyre.
- Dedikert konektorblokk til hvert enkelt skop sikrer at alle kanaler er tilkoblet og blir korrekt behandlet.
- Dokumentasjonssystemet sikrer sporbarhet for hele vaskeforløpet.
- Sikker transport og oppbevaring av skopkassetter i EndoDRY tørkeskap.
- Kommunikasjon mellom vaskemaskin og tørkeskap sikrer mot utilsiktet oppbevaring av urene skop (SMART connect option).

1) Konektorblokk
2) SMART connect
3) Sikker oppbevaring i tørkeskap



Teknikk

- Overholder EU-standarden (EN-ISO-15883-1/5).
- Full sporbarhet for vaskeprosessen og -operatørene.
- Løpende lekkasjetest og overvåking av alle kanaler på endoskopet.
- "Sprayhead"-teknologi som reduserer forbruk av pereddikesyre, såpe og vann.
- Vasker alle typer fleksible skop uansett fabrikk, samt flere stive skop.
- Innebygd UPS.

1) Sprayhead i funksjon
2) Strekkodeskanner. Registrering av bruker
3) Skjerm bilde





Tørkeskap

- Skopene kan oppbevares i opp til syv dager i tørkeskapene. Fase 3-godkjent.
- Tørkeskapene leveres enkeltstående eller som gjennomstikk.
- Kassetter følger skopet i hele syklusen og beskytter skopene under transport.
- Oppbevarer 8-16 skop pr. skap og måler kun 60 x 190 x 54 cm.
- Tørkeskapet registrerer og overvåker oppbevaringstiden for skopene.
- Medisinsk rensset luft tørker skopets kanaler og overflater, og forhindrer bakterievekst.
- Kan leveres med mange tilvalgsfunksjoner: HIS interface, dobbeltskop, Smartlight, Smart Connect og Sensor System.

- 1) Tidsstyring av skoper
 2) Kassettsystem med skop- og konnektorblokk
 3) Tørkeskap med tidsstyring og plass til 8 kassetter



Annet

- Spesialdesignede transportvogner (EndoRIDER®) med plass til 3 el. 4 kassetter/skop.
- Decotron forhandler forbruksmateriell til vaskemaskinen: RAPICIDE PA pereddikesyre og INTERCEPT Plus såpe, som også kan brukes til manuell rengjøring.
- Forberedt til ENDORA™ Endoscope tracking system, som sikrer full sporbarhet av endoskopets gang rundt på sykehuset.
- Decotrons erfarne prosjektavdeling hjelper gjerne med innredningsforslag.

- 1) Transportvogn til kassetter
 2) RapiCide PA kjemi
 3) INTERCEPT Plus såpe

